

Roger Focus II-312

聽力輔助器

使用手冊



Roger Focus II-312



A Sonova brand

PHONAK
life is on

本使用手冊適用於：

聽力設備

Roger Focus II-312

CE
0459

2020



您的聽力輔助器詳細資訊

- ① 請確保您在助聽器中使用正確類型的電池（鋅空電池）。
- ① 您的聽力輔助設備使用 2.4 GHz 至 2.48 GHz 的頻率範圍運行。

型號

☐ Roger Focus II-312

電池尺寸

312

您的聽力輔助器是由總部位於瑞士蘇黎世的全球助聽解決方案領導者 Phonak 開發的。

這些優質產品是數十年研究和專業知識的結晶，旨在讓您與美妙的聲音保持聯繫！

我們感謝您做出如此出色的選擇，並祝您未來可以享受多年的聆聽樂趣。

請仔細閱讀使用手冊，以確保您理解並充分使用您的聽力設備。有關功能和優點的更多資訊，只需聯繫您的聽力保健專家。

Phonak – life is on
www.phonak.com

內容

您的聽力設備

- | | |
|--------------|---|
| 1. 快速使用指引 | 6 |
| 2. 聽力輔助器外觀配件 | 8 |

使用聽力輔助器



- | | |
|----------------|----|
| 3. 左/右 聽力輔助器標記 | 9 |
| 4. 開機/關機 | 10 |
| 5. 電池 | 11 |
| 6. 將聽力輔助器佩戴上 | 16 |
| 7. 將聽力輔助器取下 | 17 |
| 8. 具備指示燈的多功能按鍵 | 18 |
| 9. 連結方式 | 20 |

更多資訊

- | | |
|--------------|----|
| 10. 保養和維護 | 21 |
| 11. 更換細耳管及耳塞 | 24 |
| 12. 服務及保固 | 28 |
| 13. 合規資訊 | 30 |
| 14. 符號信息和說明 | 36 |
| 15. 故障排除 | 40 |
| 16. 重要安全資訊 | 42 |

1. 快速使用指引


左 / 右 聽力輔助器標記

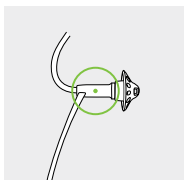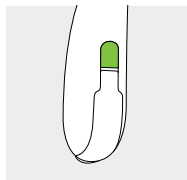


左耳聽力輔助器為藍色標記。

右耳聽力輔助器為紅色標記。


更換電池

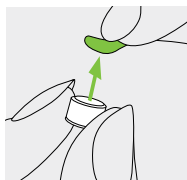

1.
從新電池上取下貼紙，等待兩分鐘。


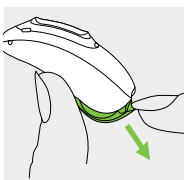


2.
開啟電池蓋。
有關電池蓋安全鎖，請參閱
章節 5.2.

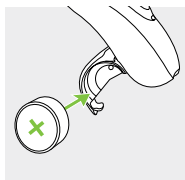


3.
將電池放入電池
蓋內， “+” 符
號朝上。

開機/關機

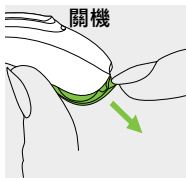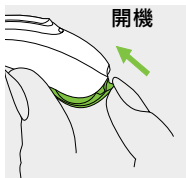

電池蓋安全鎖說明請參閱第 5.2 章。

具備指示燈的多功能按鍵

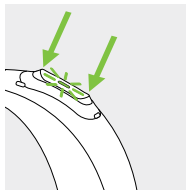


該按鈕具有多種功能。
可作為音量控制和音量控制鎖。

2. 聽力輔助器外觀配件



下圖顯示本使用手冊中描述的聽力輔助器。

Roger Focus II-312

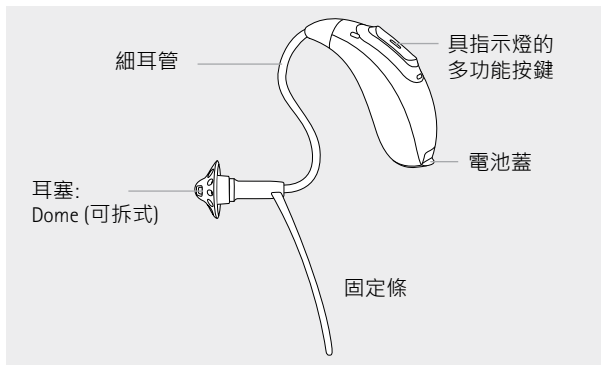

3. 左/右 聽力輔助器標記

聽力輔助器機腹及細耳管上有紅色或藍色標記,提醒您它是 左耳/右耳 聽力輔助器。

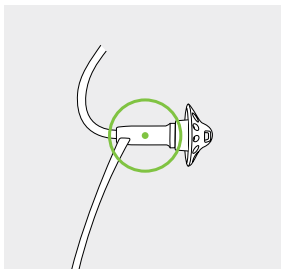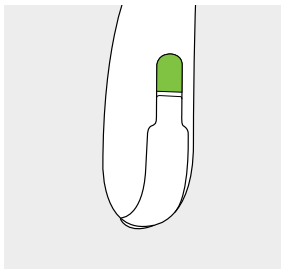


左側聽力輔助器 為藍色標記。

右側聽力輔助器 為紅色標記。


4. 開機/關機

電池蓋也是開機/關機的開關。要打開電池蓋安全鎖，請參閱第 5 章。

1.
關閉電池蓋 =
聽力輔助器開機。

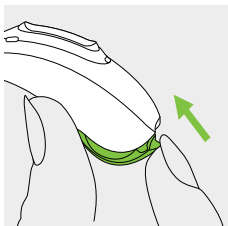


2.
開啟電池蓋 =
聽力輔助器關機。

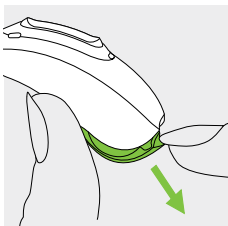


①當您打開助聽器時，您可能會聽到開機旋律。

5. 電池


5.1 置入電池 (標準電池蓋)

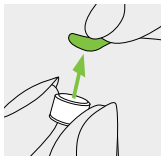

1.
從新電池上取下貼紙，等待兩分鐘。

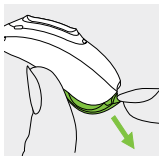

2.
將電池蓋開啟。

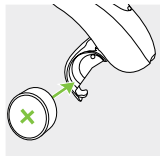

3.
將電池放入電池蓋，
“+” 符號朝上。

如果電池蓋若是具備兒童安全鎖，請繼續閱讀以下重要信息，並參考第 5.2 章中的具體說明置入電池。

❶ 如果發生電池蓋很難關閉：請仔細檢查電池是否正確置入電池蓋中且電池 “+” 符號朝上。如果電池未正確置入，聽力輔助器將無法運作且電池蓋可能會造成損壞。

 **低電量：**電池電量低時您會聽到兩聲嗶嗶聲。您將有大約 30 分鐘的時間來更換電池。我們建議您隨時準備備用的新電池。

更換電池

此聽覺輔助器需要 312 號鋅空氣電池。


型號	鋅空電池 尺寸	包裝標註 顏色	IEC 編碼	ANSI 編碼
Roger Focus II-312	312	咖啡色	PR41	7002ZD

- ❶ 請確保您在聽覺輔助器中使用正確類型的電池（鋅空電池）。另請閱讀第 16.2 章以了解有關產品安全的更多資訊。


5.2 將電池置入具有電池蓋安全鎖的電池蓋

出於安全理由（36 個月以下的兒童）建議使用，此聽覺輔助器可以配備兒童電池蓋安全鎖。

將電池蓋開啟

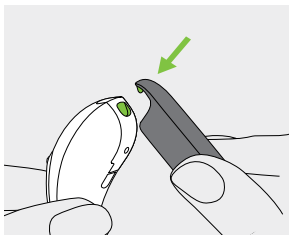


1.
將工具尖端放入助聽器底部的小孔中。

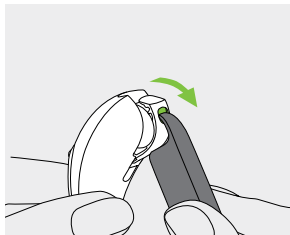


2.
使用工具作為支撐點，依照綠色箭頭方向使拉開電池蓋，即可開啟電池蓋。

置入電池

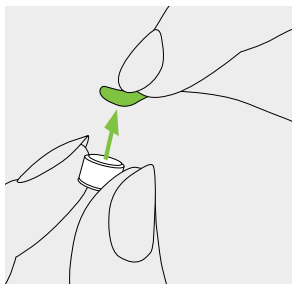


1.
從新電池上取下貼紙
並等待 2 分鐘。

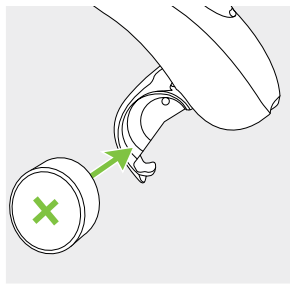

2.
將電池置入電池蓋，
“+” 符號朝上。

關閉電池蓋

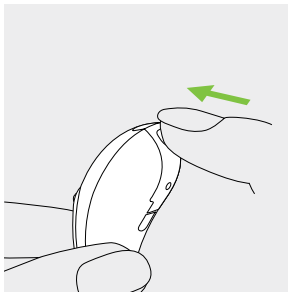


電池只有在正確關閉電池蓋門時才能具備安全鎖的功能。關閉後務必檢查電池蓋是否無法用手開啟。

6. 將聽力輔助器配戴上


1.

將聽力輔助器放置於耳後。

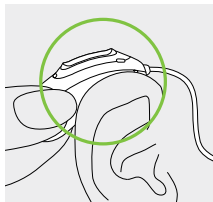


2.

將耳塞置入您的耳道中

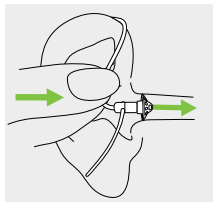


3.

如果有加裝固定條，請將其塞入耳甲腔以固定聽力輔助器。

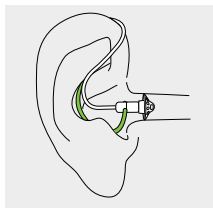

7. 將聽力輔助器取下

握住細耳管的彎頭將耳塞往外拉出，將聽力輔助器自耳後取下。

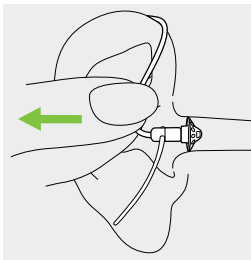

8. 具備指示燈的多功能按鍵

多功能按鍵具備多種功能


此按鍵可作為音量控制鍵和音量控制鎖。

短按按鍵上部可增加音量。

短按按鍵下部可降低音量。

要鎖定按鍵功能，請持續按住上部按鍵 5 秒鐘。

要解除鎖定按鍵功能，請持續按住上部按鈕 5 秒鐘。

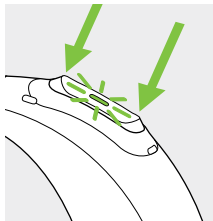

指示燈

嬰兒和幼兒的父母和照顧者可以透過指示燈輕鬆了解聽力輔助器的狀態。指示燈整合在多功能按鍵中，只要開機就顯示聽力輔助器的狀態。

聽力輔具狀態***	指示燈
☐ 鎖定多功能按鍵	綠燈閃兩下 
☐ 解除鎖定多功能按鍵	綠燈閃一下 
☐ 低電量 *	持續閃爍 
☐ 音量大小調整 (透過遙控器*或多功能按鍵) * 需額外選購	音量每次調整 綠燈閃一下 
☐ 中間音量	恆亮綠燈 
☐ 連接Roger 發射器	綠燈閃一下 
☐ 音量達到最大或最小	綠燈閃兩下 


* 若顯示低電量警示。約剩餘30 分鐘的運作時間。建議您準備備用電池。

** 當音量控制功能鎖定後將不會有燈號顯示

*** 有關警示音和搭配使用Phonak 遙控器的資訊，請參閱聽力輔助器內隨附的快速使用手冊。

9. 連結方式

下圖顯示了可用於聽力輔助器設備的連接選項。

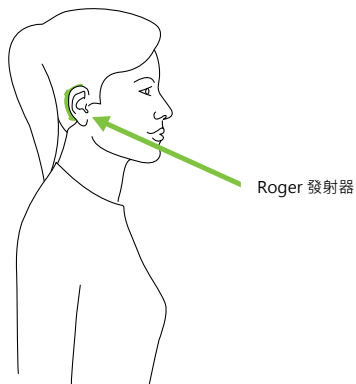

10. 保養與維護

對您的聽力輔助器進行認真和日常的保養有助於維持極佳的性能和較長的使用壽命。為確保較長的使用壽命，Sonova AG 在聽力輔助器停產後會提供至少五年的產品零件供應。

請使用以下規格作為指導。有關產品安全的更多資訊，請參閱第 16.2 章。

一般資訊

在使用髮膠或塗抹化妝品之前，您應該從耳朵上取下助聽器，因為這些產品可能會損壞它。

不使用聽力輔助器時，請將電池蓋打開，以便讓水氣蒸發。

確保在使用後始終完全擦乾聽力輔助器。
將聽力輔助器存放在安全、乾燥和乾淨的地方。

在以下條件下，您的聽力輔助器可防水、防潮和防塵：

- 電池蓋完全關閉。確保在關閉電池蓋時沒有頭髮等異物夾在電池蓋上。
- 接觸水、汗水或灰塵後，需清潔和乾燥聽力輔助器。
- 按照本使用手冊中的說明操作及維護聽力輔助器。

❶ 在水邊使用聽力輔助器會阻礙空氣進入鋅空電池，導致電池停止運作。如果您的聽力輔助器與水接觸後停止運作，請參閱第 15 章中的故障排除步驟。

每日

檢查耳塞和細軟管是否有耳垢和濕氣沉積物阻塞。使用無絨乾布清潔表面或使用聽力輔助器包裝盒中提供的清潔小刷子。切勿使用家用的清潔劑、肥皂等清潔劑清潔聽力輔助器。不建議用水沖洗這些部件，否則會有水珠滯留在細軟管中的風險。如果您需要清潔您的聽力輔助器，請向您的聽力保健專家尋求建議。

每週

使用柔軟的濕布或聽力輔助器專用清潔布清潔耳塞。如需進一步的維護或清潔說明，請諮詢您的聽力保健專家。

每月

檢查您的細軟管是否有顏色變化、硬化或裂紋。如果發生此類變化，則必須更換細軟管。請諮詢您的聽力保健專家。

11. 更換細軟管及耳塞


您的聽力輔助器配備有細軟管及耳塞。

請定期檢查細耳管及耳塞，如果耳塞髒汙阻塞會造成聽力輔助器音量或音質降低，請定期更換或清潔。耳塞建議約每 3 個月更換一次。

11.1 從 細軟管上取下耳塞


1.

一隻手握住細軟管尾端，另一隻手握住耳塞，將細軟管上取下耳塞。

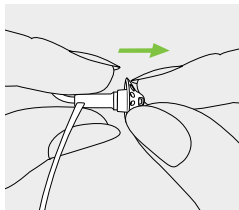


2.

輕輕拉動耳塞將其取下。

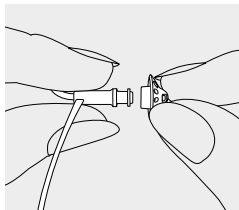

3.


使用無絨毛的乾布清潔細軟管。

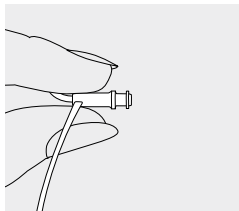

11.2 將耳塞連接到細軟管


1.

一隻手握住細軟管尾端，
另一隻手握住耳塞

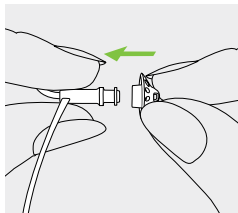


2.

將耳塞安裝於細軟管的
出聲口上。

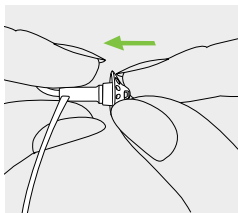

3.

確認細軟管與耳塞確實連
結穩固貼合。

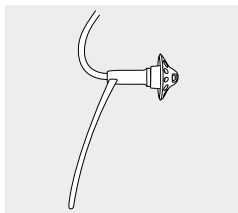

12. 服務與保固

本地保固

請向您購買設備的聽力保健專家諮詢當地保固條款。

全球保固

Sonova AG 提供一年有限全球保固，自購買之日起有效。此有限保固涵蓋聽力輔助器主機的製造和材料缺陷造成之故障，但不包括電池、細軟管或耳塞等配件。保固需出示購買憑證時才有效。

全球保固不影響您根據當地保固或管轄消費品銷售的適用國家法律可能享有的任何合法權利。

保固限制

本保固不包括因不當操作或保養、接觸化學品、浸入水中或過度壓力而造成的損壞。由第三方或非授權服務中心造成的損壞使保修無效。本保固不涵蓋聽力保健專業人員在其門市的人員服務費用。

機器序號 (左側):

機器序號 (右側):

授權專業聽力中心 (蓋章/簽名):

購買日期:

13. 合規資訊

歐洲:

符合性聲明

Sonova AG 在此聲明本產品符合醫療器械指令 93/42/EEC 以及無線電設備指令 2014/53/EU 的要求。歐盟符合性聲明的全文可從製造商或當地 Phonak 代表處獲得，其地址可從 www.phonak.com/us/en/certificates 上的列表中獲取（峰力全球地點）。

澳大利亞/紐西蘭：



R-NZ

表示設備符合適用的無線電頻譜管理 (RSM) 和澳大利亞通信和媒體管理局 (ACMA) 監管安排，以便在紐西蘭和澳大利亞合法銷售。

合規性標籤 R-NZ 適用於在紐西蘭市場供應的符合 A1 級合規性的無線電產品。

第 2 頁上列出的型號已通過以下認證：

Roger Focus II-312

美國

FCC ID: KWC-BST

加拿大

IC: 2262A-BST

注意事項一：

本設備符合 FCC 規則的第 15 部分和加拿大工業部的 RSS-210。操作需滿足以下兩個條件：

- 1) 此設備可能不會造成有害干擾，並且
- 2) 該設備必須接受任何收到的干擾，包括可能導致意外操作的干擾。

注意事項二：

未經 Sonova AG 明確批准對本設備進行更改或修改可能會使 FCC 授權操作本設備無效。

注意事項3：

根據 FCC 規則的第 15 部分和加拿大工業部的 ICES-003，本設備已經過測試並被證明符合 B 類數字設備的限制。這些限制旨在為住宅安裝中的有害干擾提供合理的保護。本設備會產生、使用和輻射射頻能量，如果不按照說明安裝和使用，可能會對無線電通信造成有害干擾。

但是，不能保證在特定安裝中不會發生干擾。如果此設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾，這可以通過關閉和打開設備來確定，鼓勵用戶嘗試通過以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整或擺放接收天線。
- 增加設備和接收器之間的距離。
- 將設備連接到與接收器連接的電路不同的電路上的插座。
- 向經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員尋求幫助。

注意事項4：

日本無線電法和日本電信商業法合規性

本設備是根據日本無線電法 (電波法) 和日本電信商業法 (電氣通信事業法) 授予的。不得修改此設備 (否則授予的指定編號將失效)。



005-102108

A19-0086005

您的聽力輔助器無線傳輸資訊

天線種類	Resonant loop antenna
運作頻率	2.4 GHz – 2.48 GHz
調製	GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK
輻射功率	< 1 mW
藍牙	
距離	~1公尺
藍牙	4.2雙模式
支持的配置文件	LE(低功率藍牙)

符合發射和抗擾度標準

發射標準	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 55011:2009+A1
	CISPR11:2009/AMD1:2010
	CISPR22:1997
	CISPR32:2012
	ISO 7637-2:2011
	CISPR25:2016
	EN 55025:2017

Immunity 標準	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 61000-4-2:2009
	IEC 61000-4-2:2008
	EN 61000-4-3:2006+A1+A2
	IEC 61000-4-3:2006+A1+A2
	EN 61000-4-4:2012
	IEC 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014
	IEC 61000-4-5:2014
	EN 61000-4-6:2014
	IEC 61000-4-6:2013
	EN 61000-4-8:2010
	IEC 61000-4-8:2009
	EN 61000-4-11:2004
	IEC 61000-4-11:2004
	IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005
	ISO 7637-2:2011

14. 符號信息和說明



通過 CE 標誌，Sonova AG 確認本產品（包括附件）符合醫療設備指令 93/42/EEC 以及無線電設備指令 2014/53/EU 的要求。

CE 符號後面的數字對應於根據上述指令諮詢的認證機構的代碼。



此符號表示這些用戶說明中描述的產品符合 EN 60601-1 的 B 類應用部分的要求。助聽器的表面被指定為 B 類應用部分。



表示醫療器械製造商，如歐盟指令 93/42/EEC 中所定義。



此符號表示用戶閱讀並考慮這些使用手冊中的相關資訊很重要。



此符號表示用戶必須注意這些使用手冊中的相關警告提示。



處理和產品安全的重要信息。



運輸過程中保持乾燥。



Bluetooth® 文字標記和符號是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，Sonova AG 對此類標記的任何使用均已獲得許可。其他商標和商品名稱是其各自所有者的商標和商品名稱。



經認證的無線電設備的日文符號。

Operating
conditions

除非本使用手冊中另有說明，否則產品的設計使其在按照預期使用時不會出現問題或受到限制。

聽力輔助器的防水及防塵等級為為 IP68（深度 1 米，持續 60 分鐘），設計用於所有日常生活情況。因此，您不必擔心助聽器會暴露在小雨或汗水中。

但是，聽力輔助器不適用於包括氯化水、肥皂、鹽水或其他含有化學物質的液體的水上活動。

SN

顯示製造商的產品序列，以便可以識別特定的醫療設備。

REF

指示製造商的目錄號，以便可以識別醫療器材。



運輸和儲存過程中的溫度：
-攝氏20° 至+60° 攝氏 (華氏-4° 至 +140°).



運輸過程中的濕度：高達 90%
(非冷凝)。

儲存期間的濕度：0% 至 70%，如果不使用。請參閱第 16.2 章中有關使用後乾燥聽力輔助器的說明。



大氣壓力：500 hPa 至 1060 hPa



打叉垃圾桶符號是為了讓您知道此聽力輔助器不得作為普通家庭垃圾丟棄。請將舊的或未使用的聽力輔助器丟棄在用於處理電子垃圾的廢棄物處理場所，或將您的聽力輔助器交給您的聽力保健專家進行處理。正確處置可以保護環境和健康。

15. 故障排除

問題

聽力輔助器沒有運作

聽力輔助器太大聲

聽力輔助器音量太小
聲或失真

聽力輔助器播放兩聲嗶聲

助聽器開啟和關閉
(間歇性)

指示燈沒有亮

原因

電池沒電

細軟管塞住

電池放置不正確

聽力輔助器關機

音量太大聲

低電量

細軟管塞住

音量調整太小聲

低電量指示音

電池或聽力輔助器上有水分造成短路

電池故障

電池沒有正確放置

① 如果問題仍然存在，請聯繫您的聽力保健專家尋求幫助。

解決方法

更換電池(第5章)

更換細軟管(第10章)

正確更換電池(第5章)

將電池蓋完全關閉進行開機 (第 5 章)

降低音量(第8章)

更換電池(第5章)

清潔細軟管(第10章)

將音量調高(第8章)

在30分鐘內更換新的電池(第5章)

使用乾布將電池及聽力輔助器擦乾

更換電池(第5章)

將電池正確置入(第5章)

16. 重要安全資訊

在使用本聽力輔助器之前，請閱讀以下頁面上的安全資訊。

16.1 危險警告

-  您的聽力輔助器使用 2.4 GHz 至 2.48 GHz 的頻率範圍內運作。搭乘飛機時請檢查航空公司是否要求關閉設備，請參閱第 1 章。
-  本產品預期的用途是將聲音透過無線傳輸的方式傳輸到耳朵，進而輔助聽力和溝通方面的困難和障礙。
-  未經 Sonova AG 明確同意，不得更改或改裝聽力輔助器。此類的更改或改裝可能會損壞您的聽力或聽力輔助器。
-  請勿在易爆區域（有爆炸危險的礦井或工業區域、富氧環境或處理易燃麻醉劑的區域）或禁止使用電子設備的區域使用本聽力輔助器。

 吞食聽力輔助器的電池是有毒的！請將機器或電池放在兒童、認知障礙人士和寵物接觸不到的地方。如果誤吞食電池時，請立即就醫！

 若使用者為 36 個月以下的兒童，必須安裝電池蓋安全鎖，以防止意外吞食電池。
如果這些安全鎖固定裝置，因施力過當或使用不合適的工具而損壞，則應將該設備帶到您的聽力保健專業人員處進行維修或更換。

 應始終監督兒童和有認知障礙的個人使用本設備以確保他們的安全。聽力輔助器是一個很小的設備，包含小的配件。請勿讓患有認知障礙的兒童和個人在無人看管的情況下使用此聽力輔助器。如果吞食，請立即諮詢醫生或醫院，因為聽力輔助器或其配件有導致窒息的風險！

 如果您感到耳內或耳後疼痛、發炎或出現皮膚刺激和耳垢加速堆積，請諮詢您的聽力保健專家或醫生。

 在極少數情況下，當從耳朵中取出細軟管時，耳塞可能掉落遺留在您的耳道中。發生耳塞掉落在耳道中的情況下，強烈建議您去看醫院將耳塞安全移除。為防止將耳塞推向耳膜，切勿嘗試將細軟管重新插入耳道中。

 以下事項適用於使用植入式醫療設備（例如：心臟起搏器、除顫器等）使用者：

- 將聽力輔助器與植入式醫療設備物保持至少 15 公分（6 英寸）的距離。

如果您遇到任何干擾，請暫時不要使用聽力輔助器並聯繫植入式醫療設備的製造商。請注意，電源線、靜電放電、機場金屬探測器等也可能造成干擾。

- 將磁鐵（例如：電池吸附工具、EasyPhone 磁鐵等）距離植入式醫療設備至少 15 公分（6 英寸）。

- 如果使用 Phonak 無線配件，請參閱無線配件使用手冊中的“重要安全資訊”一章。

 使用非本原廠製造商指定或提供的配件、充電器和充電線可能會導致本設備的電磁輻射增加或電磁抗擾度降低，並導致運作不正常。

 攜帶式射頻通訊設備（包括天線電纜和外部天線等外圍設備）應在距離聽力輔助器任何部分（包括製造商指定的電纜）超過 30 公分（12 英寸）範圍以外使用。否則，可能會導致本設備無線傳輸性能下降。

 當耳膜穿孔、耳道發炎或中耳腔疾病的患者使用時，本聽力輔助器不建議使用耳塞的方式配戴。萬一本產品的任何部分掉落在耳道中，強烈建議去看醫師以安全取出。

 佩戴時避免對耳朵發生強烈的碰撞，尤其是使用壓克力硬質訂製耳模時。訂製耳模可以提供較佳的穩定性。但使用時若發生耳朵的強烈碰撞（例如在運動期間）可能會導致訂製耳模損壞。這也有可能導致耳道或鼓膜穿孔。

 訂製耳模受到碰撞或掉落地面後，請確保其完好無損，然後再放入耳道中。

16.2 產品安全資訊

- ① 聽力輔助器設計具備防潑水但不防泡水。它設計的目的是承受正常活動和偶爾意外暴露在極端條件下。切勿將聽力輔助器浸泡入水中！聽力輔助器不是專門為長時間持續浸入水中而設計的，即在活動中佩戴例如：游泳或洗澡。在進行這些活動之前務必取下您的聽力輔助器，因為內部具備敏感的電子零件。
- ① 保護您的聽力輔助器遠離高溫影響（切勿靠近窗戶或車內）。切勿使用微波爐或其他加熱設備來烘乾您的聽力輔助器。向您的聽力保健專家諮詢合適的乾燥方法。
- ① 耳塞應該每三個月更換一次，或者當材質變硬或變脆時就應該更換。這是為了防止耳塞在置入耳道或從耳道中取出時與細軟管脫離。

- ① 不使用聽力輔助器時，請將電池蓋打開，以便將水分蒸發。確保在使用後始終完全擦乾聽力輔助器。將聽力輔助器存放在安全、乾燥和乾淨的地方。
- ① 小心不要重摔您的聽力輔助器！掉落到堅硬的表面上有可能造成損壞。
- ① 更換沒電的電池時，請務必使用新電池。如果電池漏液，請立即更換新電池，以免刺激皮膚。您可以將用過的電池放置於電池回收處。
- ① 如果您長時間不使用聽力輔助器，請將其存放在裝有乾燥劑的盒子中或通風良好的地方。乾燥的環境可以將水分從您的聽力輔助器中蒸發並防止對其零件產生影響。
- ① 聽力輔助器中使用電池電壓不能超過 1.5 伏特。請不要使用銀鋅或鋰離子充電電池，因為它們可能會嚴重損壞聽力輔助器。第 5 章中的表格內說明了您的特定聽力輔助設備需要哪種類型的電池。

- ❶ 如果您長時間不使用聽力輔助器，請取出電池。
- ❶ 包括下述輻射在內的特殊醫學或牙科檢查可能會對您的聽力輔助器的正常功能產生不利影響。在進行以下操作之前，將它們移走並保留在檢查室/區域之外：
- 使用 X 射線（也包括 CT 掃描）進行醫學或牙科檢查。
 - 使用 MRI/NMRI 掃描進行醫學檢查，產生磁場。
通過安檢門（機場等）時無需取下聽力輔助器。
如果完全使用 X 射線，它的劑量將非常低，並且不會影響聽力設備。
- ❶ 請勿在禁止使用電子設備的區域使用聽力輔助器。

備註

[illegible]



您的聽力保健專家



Manufacturer:

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Switzerland
www.phonak.com

代理商:

利凌科技股份有限公司
臺北市八德路三段30號13樓
www.kingpax.com.tw
02-2570-2085(電話)
02-2570-0717(傳真)
0800-580-889 (客服專線)



029-3333-02N/1.00/2020-04/na © 2020 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

